

# Multifit LegLifter Mk3L

## Sanfte bettseitige Unterstützung für ältere und behinderte Menschen



**Größere Unabhängigkeit für Anwender, einfachere Versorgung durch das Gesundheitspersonal**

Der Multifit LegLifter bietet älteren und behinderten Menschen größere Unabhängigkeit, wenn diese nicht mehr in der Lage sind, ihre Beine aus einer bettseitigen Sitzposition auf das Bett zu heben. Je nach Grad der Behinderung kann sich der Anwender entweder alleine oder nur mit geringfügiger Unterstützung durch eine andere Person ins Bett legen.

### Einfache Anwendung

Durch einfache Tastenbefehle hebt der Multifit LegLifter die Beine behutsam und sanft von der Seite des Bettes in die Rückenlage auf die Bettoberfläche und bringt dann die Fußablage zurück in ihre Ausgangsposition neben dem Bett.

### Behutsamer, leiser Betrieb

Die Präzision der Bestandteile, verbunden mit einer robusten Konstruktion garantiert einen leisen, sicheren und behutsamen Betrieb.



*Durch die einfache Bedienung und seine sichere, anwenderfreundliche Ergonomie ist der Multifit LegLifter die ideale bettseitige Hilfe.*

**NEUES DESIGN FÜR HÖHENVERSTELLBARE UND NIEDRIGE BETTEN**

### Anpassbar für verschiedene Bettgestelle

Der LegLifter Mk3L wurde zum Einbau in handelsübliche Betten mit Federkern, Federleisten oder Rahmen entwickelt. Er kann auf eine Sitzhöhe von 300 mm bis 700 mm eingestellt werden. Anpassungen an Pflegebetten können auf Wunsch geliefert werden.

### In wenigen Minuten installiert

Der Einbau in normale Betten und viele Pflegebetten dauert fünf bis zehn Minuten. Ein Inbusschlüssel zum Zusammenbau wird mitgeliefert.

### Kompakt, tragbar, flach

Die kompakten Abmessungen und sein geringes Gewicht von 9 kg sorgen dafür, dass der LegLifter Mk3L auch in kleinen Fahrzeugen leicht zu transportieren ist. Der flache LegLifter lässt sich leicht neben dem Bett verstauen, wenn er nicht verwendet wird.

### Hohe Leistung und Haltbarkeit

In Tests hat der Multifit LegLifter Mk3L eine Haltbarkeit von 10 000 Zyklen gezeigt.

### Geringe Wartung, einfache Pflege

Das innovative Design und die robuste Konstruktion garantieren eine leichte Reinigung und geringe Wartung.

**Der Mk3L verfügt über die folgenden Eigenschaften:**

- Neues Design für niedrige Bettrahmen
- Zugang unter dem Bett für Bettische
- Standardmäßige oder breite Fußablagen für die jeweiligen Bedürfnisse des Anwenders
- Synchronisiertes Lift-Heben für Anwender mit vermindertem Gleichgewichtssinn
- Die Beleuchtung der Handsteuerung zeigt an, wenn die Fußablage an der Bettseite abgesenkt wird
- Verbesserte Ergonomie, flacheres Profil
- Optionale Notstromversorgung mit Batterien.



*Durch das einbeinige Design bleibt genügend Platz für den Zugang zu Bettischen und für bettseitige stehende Tätigkeiten.*

## Anpassung und Bestellung des Multifit LegLifter bei individuellen Anforderungen

Das einzigartige Design des Multifit LegLifter kann an verschiedenste Bettenrahmen angepasst werden und bietet sowohl bei normalen Betten wie auch bei verstellbaren Pflegebetten Zugang von beiden Seiten des Bettes.



Vormontiert für die linke Bettseite



Vormontiert für die rechte Bettseite

Der Multifit LegLifter verfügt über dünne, aber starke Stabilisierungsleisten, die unter die Matratze passen und für eine stabile Konstruktion und einen behutsamen Betrieb sorgen. Er ist zum Einbau in Federkern- Rahmen-, Federholz- und Kastenrahmen geeignet. Einige verstellbare Pflegebetten benötigen möglicherweise speziell ausgelegte Stabilisierungsleisten, die zur Art und Breite des Rahmens passen. Bitte geben Sie uns bei Anfragen oder Bestellungen folgende Informationen:

- Art und Breite des Bettrahmens **oder**
- Marke und Modell von dem verstellbaren Pflegebett
- Bevorzugter Einstieg auf der linken oder rechten Seite des Bettes, ausgehend von der typischen Rückenlage im Bett:

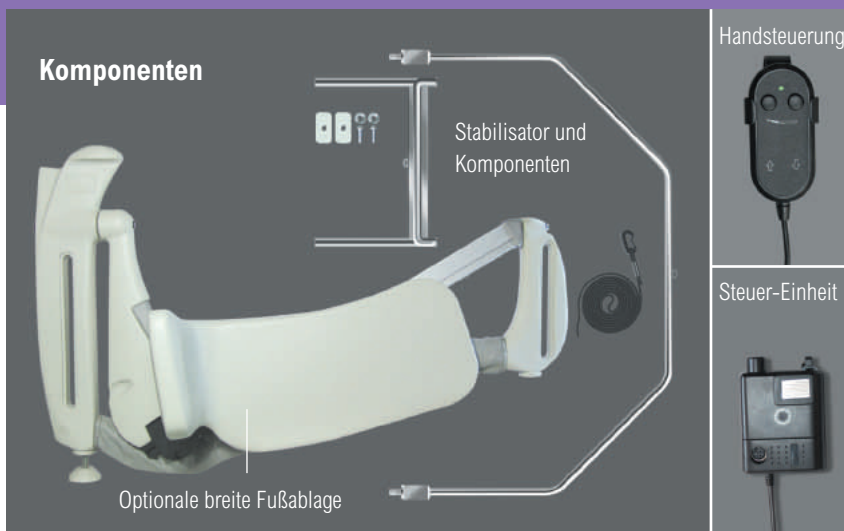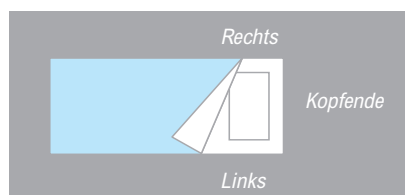

Abmessungen des LegLifter	Breite 1050 mm	Höhe 660 mm
Bereich der Höheneinstellung	300 mm bis 700 mm	
Gesamtgewicht einschließlich Transportverpackung	16 kg	
Gewicht des LegLifter	9 kg	
Einbauzeit an einem Standardbett	5 bis 10 Minuten	
Maximales Fußgewicht: Getestet für 67kg. Die Beine müssen auf die Fußablage passen		
Entfernung vom Bettrahmen bis zur Höhe der eingefalteten Fußablage	60 mm	

■ Optional ist eine breitere, austauschbare Fußablage für Anwender mit geschwollenen oder schweren Beinen erhältlich. Bei der Bestellung bitte standardmäßige oder breite Fußablage auswählen:



### Sicherheitseigenschaften

- **28V** Gleichstromversorgung für den LegLifter
- **Der automatische Sensor** schaltet den Motor im Falle eines Hindernisses hinter der Fußablage ab
- **Die Teleskopunterstützung** verhindert ein Absinken der Fußablage im Betrieb bei Hindernissen
- **Die abgerundeten Kanten** dienen der Vermeidung von Verletzungen
- **Die Beleuchtung** der Handsteuerung wird nach Absenkung der Fußablage neben dem Bett abgeschaltet.

### Vertrieben durch:

### Erleben Sie den LegLifter Mk3L in

**Aktion!** Ein kurzes Video und weitere Informationen finden Sie unter [www.multifit.co.nz](http://www.multifit.co.nz)

Entwickelt und hergestellt von:  
Multifit Hospital Supplies Ltd  
PO Box 748 Whakatane 3158, New Zealand

